




Ett lakan flera användningsområden

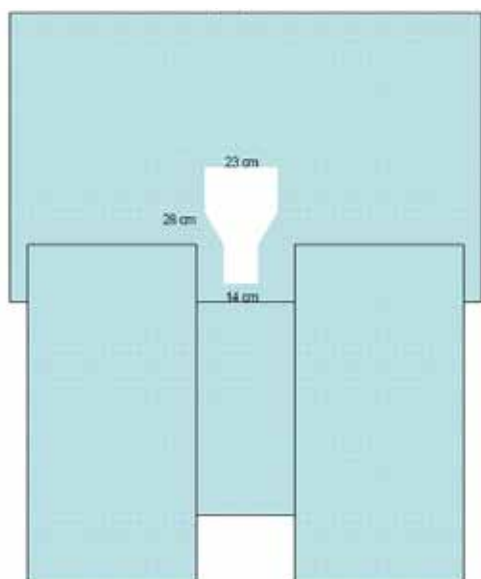

1082 Abdominovaginallakan

1082 är ett allt-i-ett lakan för ett flertal vaginala och urologiska ingrepp. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det specialformade häftande hålet ger optimal åtkomlighet vid t.ex prolapper, vaginala hysterektomier, TVT och TOT.

3M™ Steri-Drape™

Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oroa dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret.

Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som på det välkända Micropore™, som efter mer än 50 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar.

Steri-Drape™ materialet är kompatibelt med häftämnet vilket gör att 3Ms tillbehörsprodukter såsom slanghållare, instrumentpåsar och absorptionsdukar kan tas bort och flyttas utan att materialet skadas.

Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär. Materialet består av polypropylen laminerat med polyetylen och är mellanabsorberande, vilket är tillräckligt vid de flesta typer av ingrepp. Vid behov kan det kompletteras med högabsorberande dukar eller uppsamlingspåsar där det behövs, som kan kastas efter hand. På så vis minimeras ytor med högabsorberande cellulosebaserat material med kortare fibrer, och risken för fibersläpp minimeras. Så får du en renare, tryggare och tåligare drapering.

1082 Abdominovaginallakan

1082 är ett allt-i-ett lakan för ett flertal vaginala och urologiska ingrepp så som prolapser, vaginala hysterektomier, TVT och TOT. Det häftande hålet i lakanet är specialdesignat för att i storlek och form passa för flera olika användningsområden. Längden på benpåsar är 135cm vilket passar de allra flesta benstöd.


Material; Polypropylen och polyetylen (barriär)

Häftämne; Akrylatbaserat

Tillverkningsland; Mexiko

Steriliseringmetod; ETO

1082 Abdominovaginallakan uppfyller gällande standard SS-EN13795

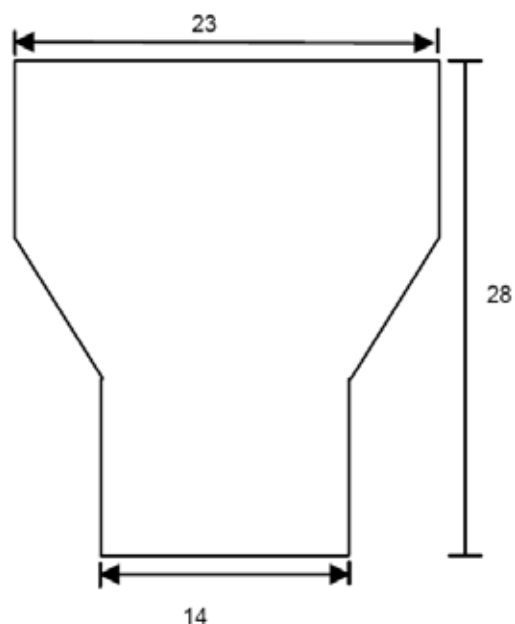

Dimensioner häftande hål.

1082 finns som enskilt lakan men är ofta lämpligt att lägga i ett kundanpassat set utifrån specifika önskemål från kliniken.

Beställningsinformation		
Art nr	Produktbeskrivning	Ant/lev fp
1084	Abdominovaginallakan	8/2





Hälsovård
3M Svenska AB
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 22 89
www.3M.com/se